

SMILY

Prenosný elektrický odstraňovač zubného kameňa



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku.

Odteraz si môžete udržiavať zdravé zuby a ďasná. Účinne odstraňuje zubný povlak, zubný kameň a škvrny zo zubov a odstraňovaním tvrdého zubného kameňa predchádza ochoreniam ďasien. Tento multifunkčný odstraňovač zubného povlaku využíva pokročilé vibrácie na odstránenie zubného kameňa zo zubov a masáž ďasien, vďaka čomu budete mať každé ráno sebavedomý úsmev a svieži dych!

Táto príručka obsahuje bezpečnostné pokyny a návod na obsluhu. Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto príručku.

OBSAH BALENIA:

- 1x elektrický odstraňovač zubného kameňa
- 1x nabíjací kábel
- 1x používateľská príručka



ŠPECIFIKÁCIE

Menovité napätie: 3,7 V

Kapacita batérie: 300 mAh

Čas nabíjania: približne 2 hodiny

Adaptér: 5 V / 5 mA

Pohotovostný prúd: 20 uA

Menovitý prúd: 200 mA

Hluk motora: menej ako 60

Prevádzkový čas: približne 2 hodiny

Prevádzkové zariadenia: 5

Stupeň vodotesnosti: IPX6

Štýl: Nabíjateľný (zabudovaná batéria) Vhodný pre: dospelých

Materiál: lekárske silikón + plast

Vhodné prostredie: normálna

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

- Tento čistiaci prostriedok je určený na starostlivosť o zuby. Je určený na odstraňovanie zubného kameňa a iné stomatologické úkony, na ktoré sú vhodné ultrazvukové vibrácie. Nepoužívajte ho na iné účely, než na ktoré je priamo určený. Ak si nie ste istí jeho použitím, obráťte sa na miestneho predajcu alebo na miesto, kde ste ho zakúpili.
- Používajte ho len na určený účel. Nedodržanie návodu na obsluhu môže mať za následok vážne zranenie používateľa alebo poškodenie výrobku, ktoré sa nedá opraviť. Pred použitím výrobku sa uistite, že ste si prečítali a porozumeli návodu na použitie.
- Pri používaní vždy priložte špičku k povrchu zuba. Vyhnite sa zbytočnému kontaktu hrotu s mäkkými tkanivami, ako sú ďasná, sliznice alebo koža.
- Pred použitím skontrolujte, či sú vibrácie hrotu normálne. Ak zistíte odchýlku od normálu, okamžite prestaňte čistiť používať a kontaktujte svojho predajcu.
- Hrot sa počas čistenia nesmie dotýkať keramickej protézy. Hrot by sa mohol poškodiť.

- Čistič používajte len s originálnym napájacím adaptérom.
- Pred pripojením adaptéra do elektrickej zásuvky sa uistite, že napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke.
- Kovová hlava zubnej kefy nie je vymeniteľná.
- Zubnú kefku nevystavujte vonkajšiemu prostrediu, extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti alebo nadmerne prašnému prostrediu.
- Používajte ho v interiéri pri teplotách od -10 °C do 40 °C.
- Výrobok neumývajte ani nenamáčajte na dlhší čas.
- Tento výrobok je určený len pre dospelých. Po použití výrobok správne skladujte. Uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili náhodnému poraneniu.
- Tento výrobok obsahuje batériu. Neumiestňujte ho do ohňa ani do nádoby s vysokou teplotou, aby nedošlo k požiaru alebo výbuchu.
- Zubnú kefku neumiestňujte do blízkosti radiátorov, otvoreného ohňa alebo iných zariadení, ktoré sú zdrojom tepla.
- Zubnú kefku držte ďaleko od očí.
- Neodpájajte napájací adaptér zo zásuvky ťahaním za napájací kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu napájacieho adaptéra alebo elektrickej zásuvky. Napájací adaptér odpojte vytiahnutím zo zásuvky.
- Pred použitím vždy skontrolujte, či súčasti jednotky nie sú poškodené. Poškodené komponenty sa nesmú používať a musia sa vymeniť.
- Kábel napájacieho adaptéra neumiestňujte na ostré predmety.
- Aby ste predišli nebezpečnej situácii, zubnú kefku ani jej príslušenstvo sami neopravujte ani nijako neupravujte. Pri všetkých opravách sa obráťte na autorizované servisné stredisko. Ak do výrobku zasiahnete, riskujete stratu svojich zákonných práv vyplývajúcich z neuspokojivého výkonu alebo záruky kvality.
- Nepoužívajte spotrebič s poškodeným káblom alebo zástrčkou, alebo ak je spotrebič nefunkčný, spadnutý alebo poškodený.
- Neobtáčajte kábel okolo spotrebiča.
- Všetky servisné práce alebo opravy musí vykonávať autorizovaný servisný zástupca.
- Výrobok nie je vhodný na použitie v prítomnosti horľavých plynov.
- Tento spotrebič používajte len na určený účel.

Upozornenie: Nepoužívajte výrobok počas nabíjania.

KOMPONENTY

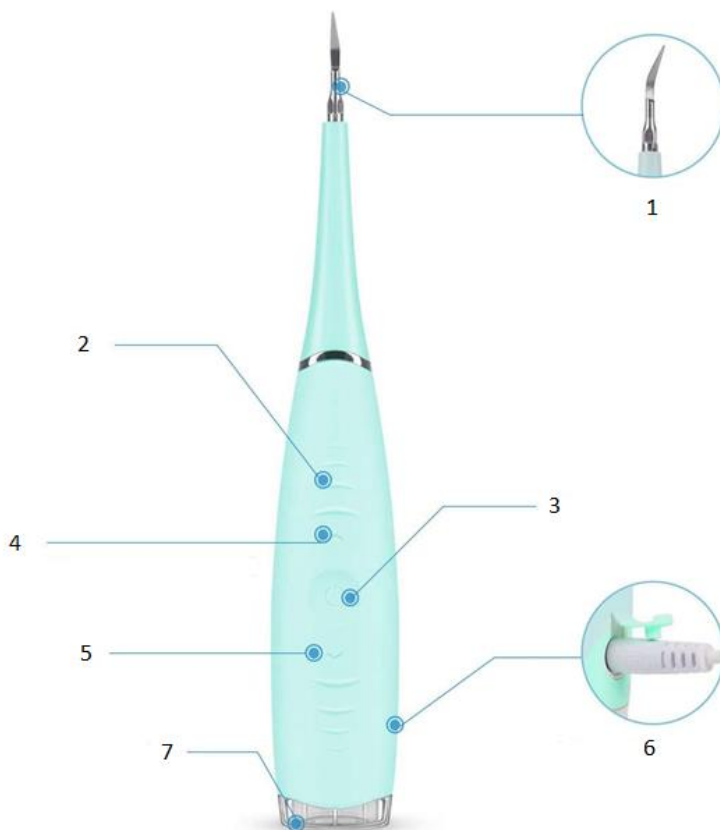

1. Čistiaca hlava	5. Nižšia rýchlosť
2. Protišmykový pás	6. Nabíjací port
3. Prepínač ON/OFF	7. Indikátor nabíjania
4. Vyššia rýchlosť (celkovo 5 prevodových stupňov nastaviteľných od najvyššieho po najnižší)	

NABÍJANIE

Nabíjanie cez USB:

Bezpečné a rýchle nabíjanie cez USB.

1. Vložte nabíjačku do spodnej časti zubnej kefky, pripojte ju k zdroju napájania a začnite nabíjať.
2. Kontrolka nabíjania sa rozsvieti na červeno, čo znamená, že sa začalo nabíjanie. Keď je zariadenie úplne nabité, kontrolka sa rozsvieti na zeleno



POZNÁMKA:

- Plné nabitie trvá približne 2 hodiny.
- Keď zubná kefka prejde do režimu nabíjania, prepne sa do režimu vypnutia (zariadenie počas nabíjania nepracuje).
- Po nabití možno výrobok použiť približne 200-krát.

Ak zubnú kefku nabíjate prvýkrát alebo ste ju dlhší čas nepoužívali (viac ako 3 mesiace), jej úplné nabitie môže trvať dlhšie.

- Nabitú zubnú kefku odpojte od sieťového adaptéra a odpojte sieťový adaptér od elektrickej zásuvky. Keď je výrobok odpojený od napájacieho adaptéra, indikátor LED nabíjania zhasne.

Odporúčania na dosiahnutie čo najdlhšej životnosti batérie:

- Výrobok nabíjajte pri izbovej teplote.
- Nenechávajte výrobok pripojený k zdroju napájania dlhšie, ako je potrebné na jeho dobitie.
- V ideálnom prípade výrobok skladujte plne nabitý.
- Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, nabíjajte ho aspoň raz za 6 mesiacov.

NÁVOD NA POUŽITIE




Tento čistič funguje na princípe, ktorý premieňa elektrickú energiu na ultrazvukovú vibračnú energiu.

Stlačením tlačidla napájania zariadenie zapnete, nastavte výkon pomocou horného a dolného tlačidla a začnite čistiť požadované oblasti na zuboch.




Strana konca hrotu je umiestnená na zube tak, aby bol pohyb hrotu rovnobežný s povrchom zuba. Prvé 2 mm hrotu sú najúčinnnejšie!

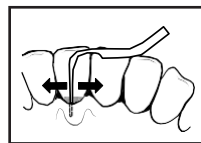

Bežné čistenie si zvyčajne nevyžaduje viac ako 50 % výkonu.

Ťažko odstrániteľný zubný kameň si však môže vyžadovať vyššie nastavenie výkonu.

Dbajte na to, aby ste počas čistenia udržiavali špičku v kontakte s povrchom zuba. Pomaly pohybujte hrotom dopredu a dozadu a nechajte prístroj pracovať. Krátkymi a dlhými ťahmi vyčistíte celý povrch každého zuba. Hrot zvyčajne smeruje do vrecka zuba.

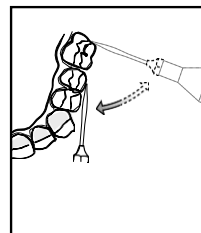

Aby bol hrot paralelný s povrchom každého zuba, je dôležité dodržiavať jeho anatómiu.



Pri správnom nastavení výkonu, primeranom tlaku na zub (približne 20 gramov, ale nie viac ako 50) a umiestnení hrotu rovnobežne s povrchom bude ošetrovanie jemné, tiché a účinné.



POZOR!

- Ak počas ošetrovania počujete zvuk škripania (hlasný a zreteľný), môže byť tlak na zub príliš malý alebo hrot nie je rovnobežný s povrchom zuba.
- Rukou nevyvíjajte príliš veľký tlak. Zubov sa vždy dotýkajte ľahkým tlakom.
- Buďte opatrní v okolí citlivej línie ďasien.
- Niektorým používateľom sa môže zdať, že jeho prvé použitie je ťažké, ale postupne sa stane vaším základným nástrojom starostlivosti o ústnu dutinu!
- Zubný kameň a povlak sa zmenia na prach. Preto si po použití vypláchnite ústa.
- Používajte ho s navlhčenými ústami.
- Ak vám počas používania vyschnú ústa, vypláchnite ich.
- Pri použití na vnútornú stranu zuba použite zubné zrkadlo.

Po skončení čistenia zubov:

- Dobre si vypláchnite ústa.

- Kovovú hlavu umyte pod čistou tečúcou vodou.
- Utrite telo zubnej kefky.

Pokyny na recykláciu a likvidáciu



Toto označenie znamená, že výrobok by sa nemal likvidovať spolu so zmiešaným odpadom z domácností v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou, recyklujte

odpad zodpovedne, čím sa podporuje opätovné používanie materiálov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite možnosť vrátenia alebo vyzdvihnutia alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Výrobok potom môžu recyklovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky príslušných smerníc ES.

