

## SMILY

Ultrahangos fogtisztító (több változat)



### HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

Kedves Ügyfél,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

Mostantól megőrizheti az egészséges fogakat és ínyt. Hatékonyan távolítja el a lepedéket, a fogkövet és a foltokat a fogakról, és a kemény fogkő eltávolításával megelőzi az ínybetegségeket. Ez a többfunkciós lepedékeltávolító fejlett vibrációval távolítja el a fogköveket a fogakról és masszírozza az ínyt, így magabiztos mosolyt és friss leheletet biztosít minden reggel!

**Ez a kézikönyv biztonsági utasításokat és használati utasításokat tartalmaz. Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.**

## CSOMAG TARTALMA:

1x elektromos fogkő eltávolító  
1x töltőkábel  
1x felhasználói kézikönyv

telo



## SPECIFIKÁCIÓK

Névleges feszültség: 3,7 V  
Akkumulátor kapacitás: 300 mAh  
Töltési idő: kb. 2 óra  
Adapter: 5 V / 5 mA  
Készenléti áram: 20 uA  
Névleges áram: 200 mA  
Motorzaj: kevesebb mint 60 decibel

Működési idő: körülbelül 2 óra  
Működtetett eszközök: 5  
Vízálló minősítés: IPX6  
Stílus: Újratölthető (beépített akkumulátor)  
Alkalmas: felnőttek számára  
Anyag: orvosi minőségű szilikon + műanyag  
Alkalmas környezet: normál

## FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK


Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a későbbi használatra.

- Ezt a tisztítószert fogápolásra tervezték. A készüléket fogkőeltávolításra és egyéb olyan fogászati feladatokra tervezték, amelyekre az ultrahangos rezgések alkalmasak. Ne használja más célra, mint amire közvetlenül szánták. Ha nem biztos a használatában, forduljon a helyi kereskedőhöz vagy ahhoz a helyhez, ahol a készüléket vásárolta.
- Csak rendeltetésszerűen használja. A használati utasítás be nem tartása a felhasználó súlyos sérülését vagy a termék javíthatatlan károsodását eredményezheti. A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy elolvasta és megértette a használati utasítást.
- Használat közben a hegyet mindig a fog felszínére helyezze. Kerülje a hegy felesleges érintkezését lágy szövetekkel, például ínyvel, nyálkahártyával vagy bőrrel.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hegy rezgése normális-e. Ha a normálistól való eltérést tapasztal, azonnal hagyja abba a tisztítószert használatát, és forduljon a kereskedőhöz.
- A hegy nem érhet a kerámiaprotézishez a tisztítás során. A hegy megsérülhet.

- A tisztítót csak az eredeti hálózati adapterrel használja.
- Mielőtt csatlakoztatja az adaptert a konnektorba, győződjön meg arról, hogy a névtáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e az Ön konnektorának feszültségével.
- A fém fogkefefej nem cserélhető.
- Ne tegye ki a fogkefét a szabadban, szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek, túlzott páratartalomnak vagy túlzottan poros környezetnek.
- Beltérben -10 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten használja.
- Ne mossa vagy áztassa a terméket hosszabb ideig.
- Ez a termék csak felnőtteknek készült. Használat után megfelelően tárolja a terméket. A véletlen sérülések elkerülése érdekében tartsa gyermekek számára elérhetetlen helyen.
- Ez a termék akkumulátort tartalmaz. A tűz vagy robbanás elkerülése érdekében ne tegye tűz vagy magas hőmérsékletű tartályba.
- Ne helyezze a fogkefét radiátorok, nyílt lángok vagy más hőforrást jelentő eszközök közelébe.
- Tartsa a fogkefét távol a szemétől.
- Ne húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból a tápkábel meghúzásával. Ez károsíthatja a hálózati adaptert vagy a konnektort. Húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból.
- Használat előtt mindig ellenőrizze a készülék alkatrészeit a sérülések szempontjából. A sérült alkatrészeket nem szabad használni, és ki kell cserélni.
- Ne helyezze a hálózati adapter kábelét éles tárgyakra.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne javítsa vagy módosítsa saját maga a fogkefét vagy tartozékait. Minden javítással forduljon hivatalos szervizközponthoz. Ha a termékkel babrál, azt kockáztatja, hogy elveszíti a nem megfelelő teljesítményre vagy minőségre vonatkozó garancia szerinti jogait.
- Ne használja a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, vagy ha a készülék meghibásodott, leesett vagy megsérült.
- Ne tekerje a kábelt a készülék köré.
- Minden szervizelést vagy javítást csak hivatalos szervizképviselő végezhet.
- A termék nem alkalmas gyúlékony gázok jelenlétében történő használatra.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.

**Megjegyzés: Ne használja a terméket töltés közben.**

## KOMPONENSEK

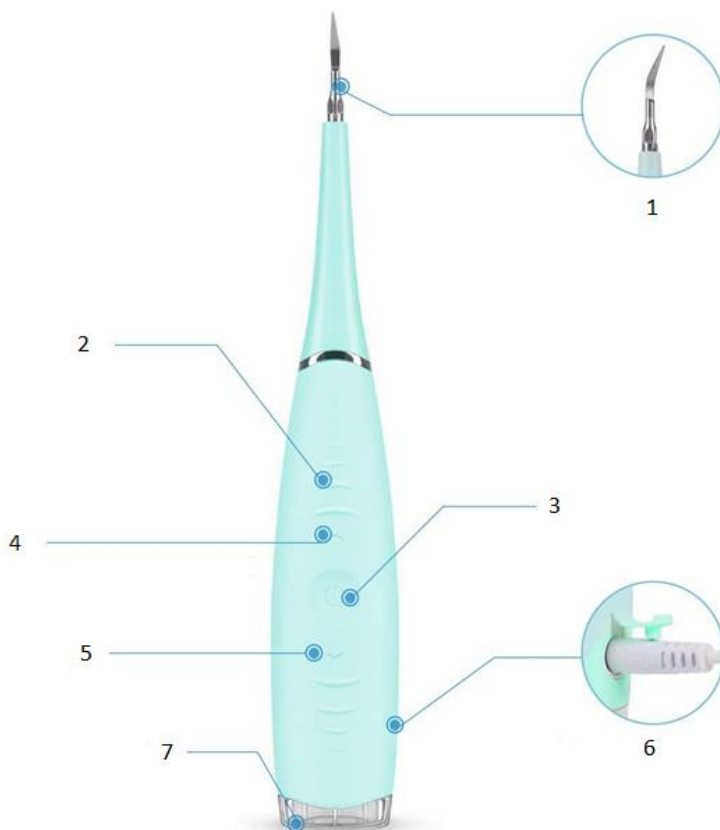

1. Tisztítófej	5. Alacsonyabb sebesség
2. Csúszásgátló öv	6. Töltőport
3. ON/OFF kapcsoló	7. Töltésjelző
4. Nagyobb sebesség (összesen 5 fokozat állítható a legmagasabbtól a legalacsonyabbig)	



#### POZNÁMKA:

- Plné nabitie trvá približne 2 hodiny.
- Keď zubná kefka prejde do režimu nabíjania, prepne sa do režimu vypnutia (zariadenie počas nabíjania nepracuje).
- Po nabití možno výrobok použiť približne 200-krát.

**Ak zubnú kefku nabíjate prvýkrát alebo ste ju dlhší čas nepoužívali (viac ako 3 mesiace), jej úplné nabitie môže trvať dlhšie.**

- Nabitú zubnú kefku odpojte od sieťového adaptéra a odpojte sieťový adaptér od elektrickej zásuvky. Keď je výrobok odpojený od napájacieho adaptéra, indikátor LED nabíjania zhasne.

## Odporúčania na dosiahnutie čo najdlhšej životnosti batérie:

- Výrobok nabíjajte pri izbovej teplote.
- Nenechávajte výrobok pripojený k zdroju napájania dlhšie, ako je potrebné na jeho dobitie.
- V ideálnom prípade výrobok skladujte plne nabitý.
- Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, nabíjajte ho aspoň raz za 6 mesiacov.

## NÁVOD NA POUŽITIE




Tento čistič funguje na princípe, ktorý premieňa elektrickú energiu na ultrazvukovú vibračnú energiu.

Stlačením tlačidla napájania zariadenie zapnete, nastavte výkon pomocou horného a dolného tlačidla a začnite čistiť požadované oblasti na zuboch.




Strana konca hrotu je umiestnená na zube tak, aby bol pohyb hrotu rovnobežný s povrchom zuba. Prvé 2 mm hrotu sú najúčinnnejšie!

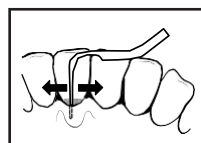

Bežné čistenie si zvyčajne nevyžaduje viac ako 50 % výkonu.

Ťažko odstrániteľný zubný kameň si však môže vyžadovať vyššie nastavenie výkonu.

Dbajte na to, aby ste počas čistenia udržiavali špičku v kontakte s povrchom zuba. Pomaly pohybujte hrotom dopredu a dozadu a nechajte prístroj pracovať. Krátkymi a dlhými ťahmi vyčistíte celý povrch každého zuba. Hrot zvyčajne smeruje do vrecka zuba.

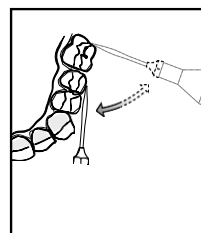

Aby bol hrot paralelný s povrchom každého zuba, je dôležité dodržiavať jeho anatómiu.



Pri správnom nastavení výkonu, primeranom tlaku na zub (približne 20 gramov, ale nie viac ako 50) a umiestnení hrotu rovnobežne s povrchom bude ošetrovanie jemné, tiché a účinné.



### POZOR!

- Ak počas ošetrovania počujete zvuk škrípania (hlasný a zreteľný), môže byť tlak na zub príliš malý alebo hrot nie je rovnobežný s povrchom zuba.
- Rukou nevyvíjajte príliš veľký tlak. Zubov sa vždy dotýkajte ľahkým tlakom.
- Buďte opatrní v okolí citlivej línie ďasien.
- Niektorým používateľom sa môže zdať, že jeho prvé použitie je ťažké, ale postupne sa stane vašim základným nástrojom starostlivosti o ústnu dutinu!
- Zubný kameň a povlak sa zmenia na prach. Preto si po použití vypláchnite ústa.
- Používajte ho s navlhčenými ústami.
- Ak vám počas používania vyschnú ústa, vypláchnite ich.
- Pri použití na vnútornú stranu zuba použite zubné zrkadlo.

### Po skončení čistenia zubov:

- Dobre si vypláchnite ústa.

- Kovovú hlavu umyte pod čistou tečúcou vodou.
- Utrite telo zubnej kefky.

---

### Pokyny na recykláciu a likvidáciu



Toto označenie znamená, že výrobok by sa nemal likvidovať spolu so zmiešaným odpadom z domácností v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou, recyklujte

odpad zodpovedne, čím sa podporuje opätovné používanie materiálov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite možnosť vrátenia alebo vyzdvihnutia alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Výrobok potom môžu recyklovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky príslušných smerníc ES.

