

# MASÁŽNA PIŠTOĽ



## POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku.

Ľahký, prenosný a ľahko použiteľný masážny prístroj, ktorý prináša skvelé výsledky!

### OBSAH BALENIA:

- 1 x masážna pištoľ (1)
- 1 x nabíjací kábel USB (2)
- 1 x hlava vidlice (pre chrbticu) (3)
- 1 x hlava náboja (pre kĺby) (4)
- 1 x guľová hlava (pre veľké svalové skupiny) (5)
- 1 x plochá hlava (celé telo) (6)
- 1 x používateľská príručka



## ŠPECIFIKÁCIE

Zdroj napájania: USB

Vstupné napätie: 5 V

Výstupné napätie: 8,4 V

Spotreba energie: 16,8 WH

Batéria: Nabíjateľný Li-on článok

### Možno nastaviť 6 úrovní:

- Úroveň 1 - 2200 otáčok za minútu (zážitkový režim)
- Úroveň 2 - 2400 otáčok za minútu (režim prebudenia svalov)
- Úroveň 3 - 2600 otáčok za minútu (režim uvoľnenia fascie)
- Úroveň 4 - 2800 otáčok za minútu (režim pre trávenie kyseliny mliečnej)
- Úroveň 5 - 3000 otáčok za minútu (režim hĺbkovej masáže)
- Úroveň 6 - 3200 otáčok za minútu (profesionálny režim)



## POPIS DIELOV



- 1 vymeniteľná masážna hlavica
- 2 výstup chladiaceho vzduchu
- 3 prepínač, tlačidlo rýchlosti
- 4 nabíjacie rozhrania
- 5 gumová rukoväť

## VAROVANIE

1. Môžu ho používať len dospelí. Ak máte nejaké zranenia, zariadenie nepoužívajte. Pred použitím tohto zariadenia sa poraďte so svojím lekárom.
2. Jednu oblasť nemasírujte dlhšie ako 1 minútu. Pred masážou sa odporúča nosiť suché oblečenie alebo si na pokožku položiť suché uteráky. Masážny prístroj zľahka stlačte a pohybujte ním pomaly a jemne.

3. Ak nie je prítomná žiadna bolesť alebo nepohodlie, možno na mäkké tkanivo aplikovať vysokú frekvenciu. Vysokorýchlostný stroj sa NESMIE používať na hlavu alebo iné kostnaté časti.
4. Vyberte si vhodnú masážnu hlavicu pre časť tela, ktorú chcete masírovať.
5. Dlhodobé masírovanie rovnakej oblasti môže spôsobiť odreniny. Ak pocítite bolesť alebo nepríjemné pocity, okamžite prestaňte zariadenie používať.
6. Prsty alebo vlasy na akejkolvek časti tela držte v dostatočnej vzdialenosti od expanznej tyče a otvoru vyžarujúceho teplo, aby ste predišli možnému zraneniu.
7. Do otvoru vyžarujúceho teplo nič nekladajte.
8. Neponárajte ho do vody a zabráňte vniknutiu vody do zariadenia cez otvor vyžarujúci teplo.
9. Toto zariadenie nevyhadzujte ani ho nesprávne nepoužívajte.
10. Pred použitím zariadenie a batériu starostlivo skontrolujte.
11. Na zariadení nevykonávajte žiadne úpravy. Neodstraňujte skrutky ani sa nepokúšajte zariadenie rozobrať.
12. Po jednej hodine nepretržitej prevádzky zariadenie vypnite a pred ďalším použitím ho nechajte pol hodiny odpočívať.
13. Toto zariadenie nepoužívajte na poranené časti tela bez súhlasu lekára.


## POUŽÍVANIE VYMENITEĽNÝCH MASÁŽNYCH HLÁV

Má 4 rôzne hlavice, ktoré sa dajú ľahko vymeniť podľa masírovanej oblasti, čo ponúka oveľa viac možností ako bežný masážny valček.




# TIPY PRO MONTÁŽ MASÁŽNÍ HLAVY

Vypněte zařízení, vyrovnejte masážní hlavu konvexní blok (modrý na obrázku 1) s masážní hlavou drážka pro pistol (červená na obrázku 1), pomalu zasuňte, dokončete (obrázek 2).

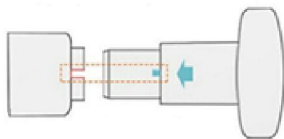

Obrázek 1

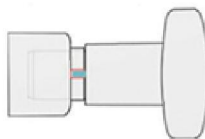

Obrázek 2

## NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ

1. Před prvním použitím jej plně nabijte **po dobu tří hodin**.
2. **Nabíjejte jej pouze pomocí zásuvky ve zdi**. Nenabíjejte jej pomocí počítače nebo podobného zařízení.
3. Kontrolky LED na zařízení budou blikat, což znamená, že se baterie nabíjí. Když všechny kontrolky LED přestanou blikat a svítí, znamená to, že je baterie plně nabitá.
4. Nepoužívejte jej při nabíjení.
5. Akumulátor lze nabíjet kdykoli a na jakékoli úrovni. Nedoporučuje se vybit baterii na úroveň červeného LED světla.
6. **Průměrná doba provozu zařízení je 2 hodiny**, v závislosti na rychlosti a aplikovaném tlaku během používání.

## NÁVOD K POUŽITÍ:

**Nepoužívejte jej nepřetržitě déle než jednu hodinu. Zastavte zařízení na 30 minut a poté jej znovu použijte.**

**Lze jej použít pouze na suchý a čistý povrch těla a nelze jej použít přes oblečení.**

1. Při plném nabití. Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí zařízení zapnete.
2. Přitlačte a jemně s ním pohybujte po kůži. Na každé části byste měli strávit přibližně 60 sekund.
3. Toto zařízení používejte na měkké tkáně těla, pouze pokud necítíte bolest nebo nepohodlí. Nepoužívejte jej na hlavu ani na tvrdé nebo kostnaté části těla.
4. Chcete-li změnit úroveň, držte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí. Každé stisknutí zvýší úroveň o jednu. Při prvním stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí zařízení začne fungovat na úrovni 1.
5. Chcete-li zařízení vypnout, držte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí. Jakmile projdete všemi úrovněmi, zařízení se vypne.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Neponořujte jej do vody nebo jiných tekutin. Chraňte jej před kapalinami a zdroji tepla. Udržujte větrací otvory motoru bez prachu a nečistot.
- Neodstraňujte šrouby.
- Povrch zařízení otřete mírně navlhčeným ručníkem, poté jej utřete do sucha měkkým hadříkem a uskladněte nebo jej vložte do dodávaného kartonu, pokud si jej berete na cesty.

### Pokyny k recyklaci a likvidaci



Toto označení znamená, že produkt by neměl být v celé EU likvidován s domácím směsným odpadem. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použitý produkt, využijte možnosti vrácení a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.



Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.