



Masszázs pisztoly az izomlazításhoz



HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.
Könnyű, hordozható és könnyen használható masszírozó, amely
nagyszerű eredményeket biztosít!

CSOMAG TARTALMA:

- 1 x masszázs pisztoly (1)
- 1 x USB töltőkábel (2)
- 1 x villafej (gerinchez) (3)
- 1 x hub fej (az illesztésekhez) (4)
- 1 x gömbfej (nagy izomcsoportokhoz) (5)
- 1 x lapos fej (teljes test) (6)
- 1 x felhasználói kézikönyv



SPECIFIKÁCIÓK

Energiaforrás: USB

Bemeneti feszültség: 5 V

Kimeneti feszültség: 8,4 V

Energiafogyasztás: 16,8 WH

Akkumulátor: Újratölthető Li-on cella

6 szint állítható be:

- 1. szint - 2200 fordulat/perc (tapasztalati üzemmód)
- 2. szint - 2400 fordulat/perc (izomébresztő üzemmód)
- 3. szint - 2600 fordulat/perc (burkolatkidőző üzemmód)
- 4. szint - 2800 fordulat/perc (tejsavas emésztési mód)
- 5. szint - 3000 fordulat/perc (mélymasszázs üzemmód)
- 6. szint - 3200 fordulat/perc (professzionális üzemmód)



A MUNKÁK LEÍRÁSA



- 1 cserélhető masszázsfaj
- 2 hűtőlevegő kivezetés
- 3 kapcsoló, sebesség gomb
- 4 töltési interfész
- 5 gumi fogantyú


FIGYELMEZTETÉS

1. Csak felnőttek használhatják. Ha bármilyen sérülése van, ne használja a készüléket. A készülék használata előtt konzultáljon orvosával.
2. Egy területet ne masszírozzon 1 percnél tovább. Ajánlott száraz ruhát viselni, vagy száraz törölközőt tenni a bőrre a masszírozás előtt. Nyomja meg enyhén a masszírozót, és lassan, óvatosan mozgassa.

3. Ha nincs fájdalom vagy kellemetlen érzés, akkor magas frekvenciát lehet alkalmazni a lágyrészekre. A nagysebességű gépet NEM szabad használni a fejen vagy más csontos részeken.
4. Válassza ki a masszírozandó testrésznek megfelelő masszázsfjelet.
5. Ha ugyanazt a területet hosszú ideig masszírozza, az horzsolásokat okozhat. Ha fájdalmat vagy kellemetlen érzést tapasztal, azonnal hagyja abba a készülék használatát.
6. A lehetséges sérülések elkerülése érdekében tartsa távol az ujjakat vagy a test bármely részén lévő haját a tágulási rúdtól és a hőkibocsátó nyílástól.
7. Ne helyezzen semmit a hőkibocsátó nyílásba.
8. Ne merítse vízbe, és akadályozza meg, hogy víz jusson be a készülékbe a hőkibocsátó nyíláson keresztül.
9. Ne dobja el vagy használja helytelenül ezt a berendezést.
10. Használat előtt gondosan ellenőrizze a készüléket és az akkumulátort.
11. Ne végezzen semmilyen módosítást a berendezésen. Ne távolítsa el a csavarokat, és ne próbálja meg szétszerelni a berendezést.
12. Egy óra folyamatos működés után kapcsolja ki a készüléket, és hagyja pihenni fél órát, mielőtt újra használná.
13. Ne használja ezt a készüléket sérült testrészeken orvosi engedély nélkül.

CSERÉLHETŐ MASSZÁZSFEJEK HASZNÁLATA

4 különböző fejjel rendelkezik, amelyek könnyen cserélhetők a masszírozott területnek megfelelően, így sokkal több lehetőséget kínál, mint egy hagyományos masszázshenger.

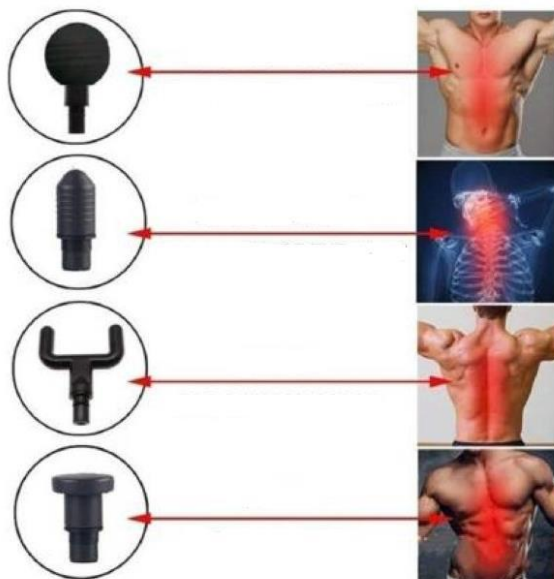

Az egész test izmaira:

Alkalmas olyan izmok masszírozására, mint a karok, hát, fenék, combok, vádli...

A test ízületeire:

alkalmas mélyszöveti masszázsra, idegek, ízületek, lábak stb. masszírozására.

Gerincmasszázsához:


Alkalmas az egész test ellazítására és formálására.

Az egész test:


Alkalmas nyak- és gerincmasszázsra, Achilles-ín masszírozására stb.

TIPPEK A MASSZÁZSFEJ FELSZERELÉSÉHEZ

Kapcsolja ki a gépet, igazítsa a masszázsfaj domború blokkját (kék az 1. ábrán) a pisztolyon lévő masszázsfaj hornyához (piros az 1. ábrán), lassan húzza be, fejezze be (2. ábra).

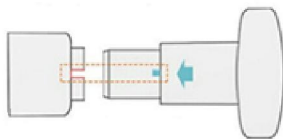

1. ábra

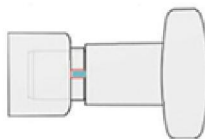

2. ábra

A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE

1. Az első használat előtt három órán keresztül töltsen fel teljesen.
2. Csak konnektorról töltsen fel. Ne töltsen fel számítógép vagy hasonló eszköz segítségével.
3. A készülék LED-lámpái villogni fognak, jelezve, hogy az akkumulátor töltődik. Amikor az összes LED-lámpa megszűnik villogni és világít, ez azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődött.
4. Ne használja a készüléket töltés közben.
5. Az akkumulátor bármikor és bármilyen szinten feltölthető. Nem ajánlott az akkumulátort a piros LED szintjére lemeríteni.
6. A készülék átlagos üzemideje 2 óra, a használat során alkalmazott sebességtől és nyomástól függően.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Ne használja folyamatosan egy óránál tovább. Állítsa le a készüléket 30 percre, majd használja újra.

Csak száraz és tiszta testfelületeken használható, ruházaton nem alkalmazható.

1. Teljesen feltöltve. Nyomja meg a be/ki gombot a készülék bekapcsolásához.
2. Nyomja össze, és óvatosan futtassa végig a bőrön. Minden egyes részre körülbelül 60 másodpercet kell szánni.
3. Csak akkor használja ezt a készüléket a lágy testszöveteken, ha nem érez fájdalmat vagy kellemetlenséget. Ne használja a fején vagy a test kemény vagy csontos részein.
4. A szint megváltoztatásához tartsa lenyomva a be/ki gombot. Minden egyes megnyomás egyvel növeli a szintet. A be-/kikapcsoló gomb első megnyomása után a készülék az 1. szinten kezd el működni.
5. A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a be/ki gombot. Ha az összes szintet átlépte, a készülék kikapcsol.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Védje a folyadékoktól és a hőforrásoktól.
- Tartsa a motor szellőzőnyílásait por- és szennyeződésmentesen.
- Ne távolítsa el a csavarokat.
- Törölje át a készülék felületét enyhén nedves ruhával, majd törölje szárazra puha ruhával, és tárolja, vagy tegye a mellékelt kartondobozba, ha újra viszi.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a vegyes háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani az EU egész területén. A környezet vagy az emberi egészség ellenőrizetlen ártalmatlanítás miatti esetleges károsodásának elkerülése érdekében a hulladékot felelősségteljesen újrahasznosítani, hogy ösztönözze az anyag újrafelhasználását. Használt termék visszaküldéséhez használja a visszaküldési és átvételi lehetőséget, vagy lépjen kapcsolatba azzal a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta. Ezután környezetbarát módon újrahasznosíthatják a terméket. A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó EK-irányelvek követelményeinek.

