



Automata fogkefe (több változat)

Modell: WA-520

Tisztelt Vevő, Köszönjük a bizalmat, amelyet a termék megvásárlásával tanúsított irántunk. Hisszük, hogy teljesen elégedett lesz vele. Ezek az utasítások a termék megfelelő használatára vonatkoznak. Kérjük, őrizze meg a jövőbeni használatra. Kérjük, használat előtt olvassa el a termék használatára vonatkozó összes utasítást és tanácsot.

Jellemzők:


1. Vezeték nélküli töltés. A töltési idő kevesebb mint 90 perc, a töltési idő több mint egy hét.
2. Eggyombos érintésvezérlés.
3. Módok: 1. erős tisztítás, 2. kényelmes gyengédebb tisztítás, 3. nagyfrekvenciás masszázs
4. fehérítés (ebben az üzemmódban csak a tetején lévő LED-ek világítanak).
4. Átfogó fogkefe - az összes fog átfogó tisztítása mindössze 30 másodpercet vesz igénybe.
5. Az utolsó üzemmód kiválasztásának automatikus memória funkciója
6. Tisztítás és masszázs funkció egyben

Kefe jellemzői:

1. Védettségi fok (vízálló) IPX7
2. Az U alakú kefefej 100% élelmiszeripari szilikonból készült, antibakteriális és puha anyagból. A sörték elhelyezkedésüknek köszönhetően minden fogat és ínyt elérnek.
3. A fogkefe használata megelőzi a fogágybetegségeket, elősegíti a fogágy vérkeringését és csökkenti a fogágybetegségek előfordulását.



Tervezés és kiegészítők

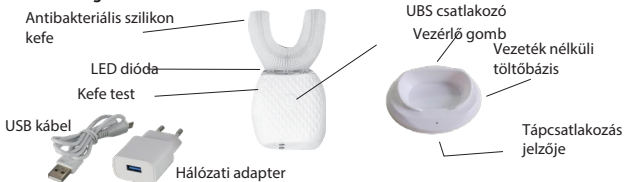

Újratöltés

Először dugja be az USB-csatlakozót a töltőalapba, és csatlakoztassa az USB másik végét a tápegységhez.

- Helyezze a fogkefét az újratölthető alapba, a készülék tetején lévő LED-ek villogni fognak.
- Töltés közben a termék tetején és a vezérlőgomb körül lévő LED-lámpák villogni fognak. A villogás megszűnik, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött.

Műszaki adatok

Termék mérete	103 x 52 x 25 mm	A termék súlya	100g+/- 10g
Névleges feszültség	3,2 - 3,7 V	Névleges teljesítmény	több mint 5 W
Működési áram	több mint 1,6 A	Töltési idő	kevesebb mint 90 perc

Használja a címet.

Első lépés

Helyezze a fogkefét a fogkefe tetején lévő tengelyre.

Második lépés

A fogkefe a hagyományos fogkrémmel együtt használható, fogszabályzóval rendelkezők számára is alkalmas.

Harmadik lépés


Helyezze a fogkefét a szájába, és óvatosan nyomja össze. a felső és alsó fogakkal. Nyomja meg többször a vezérlőgombot a kívánt tisztítási mód kiválasztásához. A fogmosás körülbelül 40 másodpercet vesz igénybe. A fogkefe ezután automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés: Használja a fehérítő üzemmódot a következőkkel együtt fehérítő fogkrémmel.

Negyedik lépés

Használat után tisztítsa meg a fogkefét víz alatt. és száraz ruhával törölje le a kefe testét.

- A kefe használatakor az üzemi hőmérséklet 0 - 50 °C.
- Töltés normál környezeti hőmérsékleten.
- Ha hosszabb ideig nem használja a fogkefét, használat előtt töltsse fel teljesen.
- Hűvös és száraz helyen tárolja, ne tegye ki napfénynek.

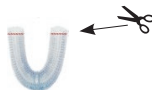

A szilikonkefe méretét ollóval állíthatja be.



5. Csak a fenti utasításoknak megfelelően tisztítsa, ne merítse a kefetestet vízbe.
6. Ne használja a készüléket 10 percnél tovább.
7. Száraz helyen töltsé, és csak a mellékelt USB töltőkábelt használja.

Megjegyzés:

A készüléket kizárólag a fogakon használja!

Ha a használat kellemetlen, azonnal hagyja abba.

Tisztítás és karbantartás

Ne használjon maró vagy súroló hatású tisztítószeret a készülék tisztításához. Ez károsíthatja a felületet. Húzással vegye ki a szilikon antibakteriális kefét a készülékből. és alaposan tisztítsa meg. Szükség esetén tisztítsa meg a készüléket.

Ha szükséges, törölje át az alapot tiszta, nedves ruhával. Ezután mindent alaposan megszáritunk. Helyezze az ecsettestet a talpba. A kefét és a tartozékokat száraz helyen, gyermekek és állatok elől elzárva tárolja.

A környezet védelme

Az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására vonatkozó információk
Ne dobja a terméket a háztartási hulladékba, ha a termék élettartama lejárt, vagy ha a javítás nem lenne gazdaságos. A termék megfelelő ártalmatlanítása érdekében vigye el azt a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol ingyenesen átveszik. A megfelelő ártalmatlanítás segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyek a nem megfelelő hulladékelhelyezésből adódhatnak. További információért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék helytelen ártalmatlanítása





a nemzeti szabályoknak megfelelően bírságok szabhatók ki.

Szolgáltatás

Ha a termék megvásárlása után bármilyen hibát talál, kérjük, forduljon a szervizhez. A termék használatakor kövesse a mellékelt használati útmutatóban található utasításokat. Nem fogadunk el semmilyen igényt, ha Ön megváltoztatta a terméket, vagy nem követte a használati utasításban foglalt utasításokat.

A garancia nem terjed ki:

- a termék funkcionális részeinek természetes elhasználódása a normál használat következtében
- a termék szokásos karbantartásával kapcsolatos szervizelési beavatkozásokra (pl. tisztítás, a normál elhasználódásnak kitett alkatrészek cseréje).
- külső hatások (pl. éghajlati viszonyok, por, nem megfelelő használat stb.) által okozott hibák.
- a termék leejtése, ütés, ütés stb. által okozott mechanikai sérülések.
- a termék nem megfelelő kezelése vagy a használati utasítással ellentétes használata, túlterhelés, nem megfelelő vagy nem eredeti alkatrészek használata, nem megfelelő vagy nem eredeti tartozékok vagy nem megfelelő szerszámok használata stb. által okozott károk.
- a nem eredeti adapterek használata vagy az eredeti adapter más termékhez való használata által okozott károkért. Egyazon terméken belül mindig be kell tartani a kölcsönös kompatibilitást.
- Az olyan reklamált termékek esetében, amelyeket nem megfelelően biztosítottak a szállítás során bekövetkező mechanikai sérülések ellen, a tulajdonos viseli a kár kizárólagos kockázatát. A szállító fenntartja a jogot a használati utasítás módosítására, és nem vállal felelősséget a gépelési hibákért. Az illusztrációk és leírások a modelltől függően eltérhetnek a valóságtól.





ÚJRATÖLTHETŐ ELEMOK

Az új vagy hosszú ideig tárolt akkumulátorok csak többszöri töltés és kisütés után érik el teljes kapacitásukat. Ebben az esetben ajánlott az akkumulátorokat normál töltéssel, az akkumulátor kapacitásának egytizedével tölteni a használati utasításban megadott ideig (ez az akkumulátor típusától függően 5-16 óra lehet). Töltés előtt mindig hagyja, hogy az akkumulátor hőmérséklete szobahőmérsékletre stabilizálódjon. Az akkumulátorok 15 °C alatti és 30 °C feletti hőmérsékleten történő töltése a következő ciklusban kapacitáscsökkenést eredményez. Körülbelül 2 óra alatt stabilizálódik a hőmérséklet 0 °C-ról 15 °C-ra szobahőmérsékleten. Fontos megjegyezni, hogy a hőmérsékletet az akkumulátor belsejében kell stabilizálni, nem csak a felszínen. Az akkumulátor töltése 0 °C alatti vagy 40 °C feletti hőmérsékleten az akkumulátor nagymértékű önkisüléséhez vezet. A kültéri használatra szánt termékek esetében fontos figyelembe venni a következőket hogy a 0 °C alatti és 40 °C feletti hőmérséklet csökkentheti a készülék működőképességét. Ez azt eredményezi, hogy az akkumulátor töltéskor teljes kapacitására, de néhány nap múlva teljesen lemerül.

HASZNÁLAT - Az akkumulátorokat soha nem szabad lemerült cellából kisütni, mivel ez az állapot a tönkremenetelűkhöz vezethet. Ha egy készletben több akkumulátor van, tartsa be a cellánkénti minimális végső kisütési feszültséget (NiMH 1V; Li-Pol 3V; Li-Ion 3V; SLA 1,75V). A maximális töltési feszültség és a minimális kisütési feszültség értékek be nem tartása az akkumulátor károsodásához vagy gyors kapacitásvesztéshez vezet. Fontos megjegyezni, hogy ha például egy 12V-os NiMH akkumulátort használunk (amely 10 különálló cellából áll), amikor a feszültség cellánként 1V-ra csökken, az akkumulátor teljes feszültsége 10V. Ennél a feszültségnél az akkumulátor általában még használható (AKU fúrógép már nem akar egyetlen csavart sem meghúzni, az autó már nem akar mozogni, de miután





meghúzhatod a csavart, és az autó még egy kicsit járni fog, vagy égve hagyhatod az izzót, amíg világít, még ha egyébként nem is világít), de kockáztatod, hogy megsérül, és így jelentősen lerövidül az élettartama.

VALÓDI ÉLET - Az akkumulátorok élettartama nagyban függ az üzemeltetési körülményektől (környezeti hőmérséklet, töltési és kisütési áram stb.) A megfelelő körülmények között üzemeltetett szabványos akkumulátorok élettartama NiMH esetében legfeljebb 500 ciklus, SLA (ólomsav) esetében legfeljebb 500 ciklus, Li-Pol és Li-Ion esetében 250-350 ciklus. Az akkumulátor élettartamának határát az új akkumulátorhoz képest 40-30%-os kapacitásvesztés jelenti. Ez a normál használat során bekövetkező kapacitásvesztés semmiképpen sem tekinthető az akkumulátor hibájának, hanem az akkumulátor jellemzőjének. SELF-kisütés - az akkumulátor olyan jellemzője, amely a tárolás során az akkumulátor által a terhelésnek leadni képes töltés fokozatos csökkenéséhez vezet, amikor ezt követően kisütik. A töltésvesztés (kapacitáscsökkenés) mértéke nagymértékben függ a tárolás során a környezeti hőmérséklettől. A hőmérséklet növekedésével az önkisülés is növekszik.

TÁROLÁS - Tárolja az akkumulátorokat feltöltött állapotban, és a termék jellegének megfelelően folyamatosan töltsse őket (pl. 3 hónap után töltsse fel az akkumulátort) Minden akkumulátortípust ajánlott szobahőmérsékleten, száraz környezetben tárolni.

KÖVETKEZTETÉS - Az akkumulátor-ápolás mindenki saját belátása szerint történik. Aki nem tartja be a fenti szabályokat, annak rövid időn belül csökken az akkumulátor teljesítménye, és kénytelen lesz újat vásárolni. Ha jól vigyáz az akkumulátorra és megfelelően tölti, akkor az biztosan hosszú élettartammal és teljesítménnyel hálálja meg.

