




REEDOG

NoBark Smart Mini

TC-011

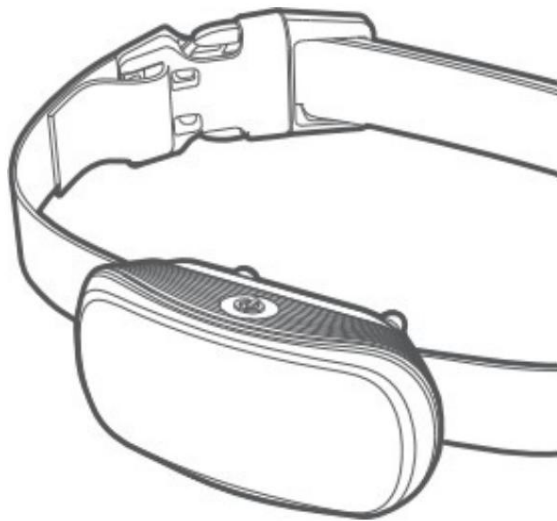

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
Tartsa biztonságos helyen!

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

- Agresszív kutyákon tilos használni. Egy agresszív kutya súlyos sérülést vagy akár halált is okozhat a tulajdonosnak vagy más embereknek. Ha nem biztos abban, hogy ez a termék megfelelő-e az Ön kutyájának, forduljon egy professzionális kutyakiképzőhöz.
- A kiképző nyakörv nem játék, tartsa távol a nyakörvet a gyerekektől.
- A nyakörv használata előtt ellenőrizze, hogy kutyája egészséges-e. Ha nem biztos ebben, forduljon állatorvosához.
- Ha a nyakörv be van kapcsolva, az emberi test nem érintheti közvetlenül a termék érintkezési pontjait.
- Ha az érintkezési pontokon kiütés vagy fájdalom jelentkezik, hagyja abba a termék használatát, amíg a bőr meg nem gyógyul.
- A nyakörv viselési ideje nem haladhatja meg a napi 12 órát, és 1-2 óránként ellenőrizni kell.
- Ez a termék 2 kg-nál nagyobb és 6 hónapnál idősebb kutyák számára alkalmas.
- Tilos ezt a terméket pórázhoz használni a háziállatoknak.
- A kutya nyaka körüli hosszú szőrt le lehet rövidíteni, de nem ajánlott teljesen leborotválni.



Bark Collar: 1 Pcs




User Manual : 1 Pcs




Magnetic Charging Cable : 1 Pcs

1. Ugatásgátló nyakörv
2. Felhasználói kézikönyv
3. Töltőkábel

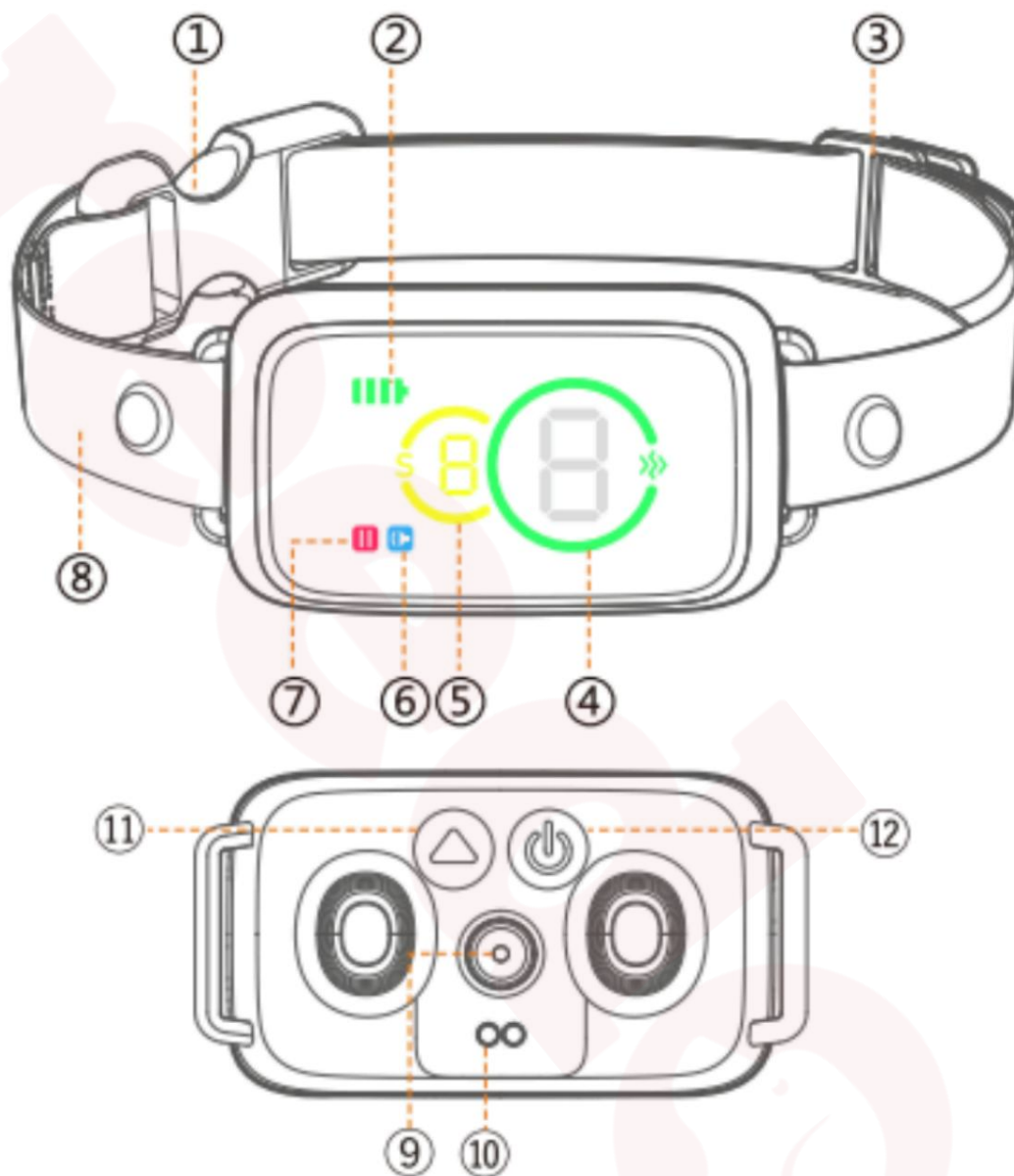

1. Műanyag csat
2. Töltöttségi szint
3. Csúszó csat
4. Rezgésszint
5. Érzékenységi szint
6. Figyelmeztető jelzés
7. Szünet ikon
8. Állítható nyakörv
9. Hangérzékelő
10. Mágneses töltés
11. Szintbeállító gombok
12. Be-/kikapcsoló gomb

1. TÖLTSE FEL AZ UGATÁSGÁTLÓ NYAKÖRVET

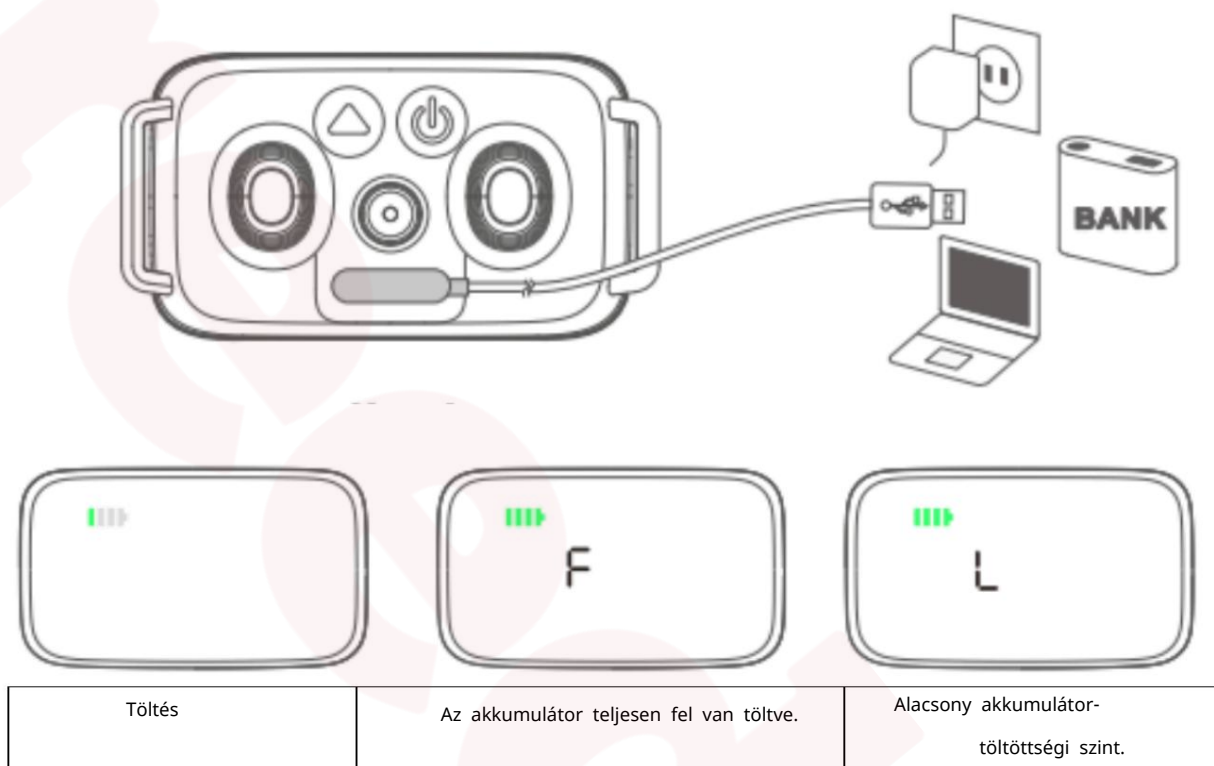

2. KAPCSOLJA BE A NYAKÖRVET



TARTSA LENYOMVA A GOMBOT LEGALÁBB 2 MÁSODPERCIG

3. ÁLLÍTSA BE A NYAKÖRVET

Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a beállítani kívánt üzemmód kiválasztásához. Ezután nyomja meg a háromszög gombot az üzemmód szintjének beállításához.


VÉDELMI MÓD



Miután a nyakörv 5x egymás után aktiválódik, a védelmi mód elindul, és a nyakörv kikapcsol. A be-/kikapcsoló gomb megnyomásával újra aktiválja a nyakörvet.

FUNKCIÓTESZT

Fújjon a hangérzékelőre a termék elindításához, így működési tesztet hajt végre.

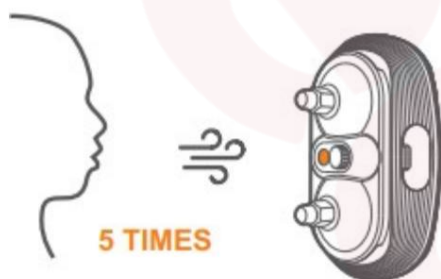

Fújjon ötször a nyakörv érintkezési pontjai közé, ahol a hangérzékelő található, annak ellenőrzésére, hogy minden funkció rendben van-e.

Az elektrostimuláció teszteléséhez tesztlámpát kell használnia az impulzus működésének tesztelésére. Minél magasabb az impulzusszint, annál erősebb a fény.

NYAKÖRV BEÁLLÍTÁSA

1



Határozza meg a nyakörv hosszát, amely illeszkedik a kutya nyakához.

2



Fűzze be a kiegészítő hevedert a csúszó csatba.

3



Helyezze a nyakörvet a kutya nyakába. Ellenőrizze, hogy a nyakörv megfelelően van-e elhelyezve.

4



Kérjük, ügyeljen arra, hogy a termék szorosan illeszkedjen a kutya nyakába, de úgy, hogy laza maradjon, és egy ujj beférjen a nyakörv és a kutya nyaka közé.

MEGJEGYZÉS: A csúszócsat megfelelő használata megakadályozhatja, hogy a nyakörv meglazuljon kedvence nyaka körül.

A nyakörv biztonságos és megfelelő működésének garantálása érdekében annak megfelelően kell lennie felhelyezve. Minden elektronikus nyakörvnek szorosan illeszkednie kell a bőrhez. Az elektródáknak egészen a szőrzet alatti bőrhez kell illeszkedniük, de nem szabad fojtaniuk. Ha a nyakörv túl laza, a stimuláció nem működik megfelelően, mivel az elektródák nem érintkeznek megfelelően az állat bőrével. Ha a kutya nem reagál a stimulációra, mindig ellenőrizze, hogy az elektródák szorosan illeszkednek-e a bőrhez. Edzés vagy futás közben a túl laza nyakörv bőrirritációt okozhat az állat nyakán. A megfelelően illeszkedő nyakörv segít megelőzni az irritációt. Fontos a nyakörv megfelelő illeszkedése.

Úgy kell felhelyezni, hogy ne fojtassa a kutyát, és megfelelően tudjon lélegezni. A nyakörv soha nem akadályozhatja meg az állatot a légzésben. A vevőegységet megfelelően kell elhelyezni az állat nyakának közepén.

A maximális hatás és kutyája biztonságának érdekében ellenőrizze a nyakörv elhelyezését, megfelelő szorosságát és az elektródák helyes elhelyezését. Ezenkívül ellenőrizze a bőrt, ahol az elektródák érintik, hogy nincs-e kiütés vagy irritáció. Ebben az esetben használja a nyakörvet rövidebb ideig, vagy forduljon állatorvosához. A nyakörvet 12 óránál tovább ne viselje folyamatosan (ez minden nyakörvre ajánlott, még a nem elektromosra is).

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatásának joga fenntartva.

Szervízközpont és disztribúció

Reedog, sro
Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10
Cseh Köztársaság

Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu